

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	1 van 6



Gebruiksaanwijzing

Titel	Naam	Handtekening	Datum
Opgesteld door:	Wu Shuang	<i>Wu Shuang</i>	28.04.2025
Gecontroleerd door:	Chen Lin	<i>Chen Lin</i>	28.04.2025
Goedgekeurd door:	Liu Chen	<i>Liu Chen</i>	28.04.2025

Jiangsu Hanyao Medical Devices Co., Ltd.

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	2 van 6

Revisiehistorie

NEE.	Versie NEE.	Datum	Gewijzigde inhoud	Gewijzigd door
1	A/0	02.02.2023	Eerste versie	Wu Shuang
2	A/1	12.11.2024	Update: Voeg het advies voor het op de huid plakken toe. Beoogd gebruik: Het is bedoeld voor geavanceerde warmtetherapie voor tijdelijke verlichting van lichte spier- en gewrichtspijn en -stijfheid als gevolg van overbelasting, verrekkingen, verstuikingen en artritis. Contra-indicatie: Verwijder het woord "huisdier". Beoogde gebruiksomgeving, opslag en verwijdering: Hoogte 1500 m Voeg website-informatie van e-IFU toe.	Wu Shuang
3	A/2	28.04.2025	Update: ISO 15223-1:2021/Amd1 :2025 Etikettering cha gned	Wu Shuang

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	3 van 6

Belangrijke opmerking



Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor elk gebruik en bewaar deze op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor gebruikers en/of bevoegd personeel.



Lees de waarschuwingen die met dit symbool zijn aangegeven zorgvuldig door.

Het wordt aanbevolen om dit product op de huid te gebruiken.

Eén laag ondergoed heeft geen invloed op het gebruik van het product.

Productnaam:

Warmtepakketten

Toepasselijke specificaties en modellen

Model		Specificatie
Warmtepleister		130×95 mm
Gezamenlijke warmtepleister		145×100 mm
Schouder- en nekwarmer	Schouder- en nekwarmer I	235×90 mm
	Schouder- en nekwarmer II	285×90 mm
	Schouder- en nekwarmer III	295×90 mm
	Schouder- en nekwarmer III	310 x 119 mm
	Schouder- en nekwarmer XL	320× 260 mm
	Schouder- en nekwarmer XL	350× 260 mm
Verwarmingsriem		880-145 mm
Kniewarmer		410 × 140 mm
Menstratiepijnpleister		130×95 mm

Beoogd gebruik:

Het is bedoeld voor warmtetherapie ter tijdelijke verlichting van lichte spier- en gewrichtspijn en -stijfheid als gevolg van overbelasting, verrekkingen, verstuikingen en artritis.

Beoogde gebruikers:

Volwassenen ouder dan 18 jaar die behoefte hebben aan warmtetherapie.

Beoogde patiëntenpopulatie:

Mensen met lichte spier- en gewrichtspijn als gevolg van overbelasting, verrekking, verstuiking en artritis en de beperkingen van de beoogde gebruikers.

Gebruiksfrequentie:



Het product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	4 van 6

Indicatie:

Het is bedoeld om op het lichaamsoppervlak te worden aangebracht om dat oppervlak en/of het onderliggende weefsel, bijvoorbeeld de spieren, te verwarmen.

Contra-indicatie :

- Niet gebruiken bij mensen met diabetes, een slechte bloedsomloop of hartaandoeningen.
- Niet gebruiken bij mensen met reumatoïde artritis.
- Niet gebruiken in combinatie met andere vormen van therapeutische warmte, waaronder elektrische verwarming.
- Niet gebruiken op ongezonde, beschadigde of gebroken huid, of op een gevoelige huid.
- Niet gebruiken bij mensen die het product niet kunnen verwijderen, waaronder kinderen, zuigelingen, zwangere vrouwen en sommige ouderen.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Niet gebruiken als uw arts het gebruik ervan voor u of uw aandoening afraadt.

Mogelijke complicaties:

Het kan huidverbranding, roodheid, jeuk enz. veroorzaken. Het kan vanzelf verdwijnen of medische hulp nodig hebben als het ernstig genoeg is.

Voorzorgsmaatregelen:

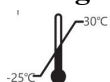
Het is normaal dat de huid licht rood wordt na het verwijderen van de wrap. Als uw huid na enkele uren nog steeds rood is, stop dan met het gebruik van warmtepakkingen totdat de roodheid volledig is verdwenen. Wees voorzichtig en controleer uw huid regelmatig. Stop het gebruik als het kussen te warm aanvoelt of oncomfortabel is.



Waarschuwing:

- Alleen voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.
- Dit product kan aan de huid blijven kleven.
- Als het materiaal van het warmtekussen beschadigd of gescheurd is.
- In combinatie met medicinale lotions, crèmes of zalven.
- Op plekken met blauwe plekken of zwellingen die binnen 48 uur zijn ontstaan.
- Als u niet in staat bent om de wrap zelf aan te brengen en te verwijderen.
- Als u bedlegerig bent of vatbaar bent voor huidzweren.
- Op lichaamsdelen waar u geen warmte kunt voelen.
- Controleer de huid regelmatig op tekenen van brandwonden of blaren. Stop het gebruik als u deze aantreft.
- Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u ongemak, een branderig gevoel, zwelling, uitslag of andere veranderingen aan uw huid.

Beoogde gebruiksomgeving



Temperatuur -25 °C ~ 30 °C



Vochtigheid 20%~80% RV

Hoogte ≤1500 m

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	5 van 6

Gebruiksaanwijzing:

1. Open de plastic verpakking en verwijder het warmtepakket.
2. Verwijder het papier om de klevende kant bloot te leggen.
3. Nadat het product volledig in contact is gekomen met de lucht en warmte begint te genereren, brengt u het aan op de huid op de plaats die overeenkomt met het model of op de buitenkant van nauwsluitende kleding en strijkt u het glad.
4. Verwijder het warmtepakket en gooi het weg nadat de warmte is verdwenen.

Sterilisatie:



Niet-steriel product.

Houdbaarheid:



De houdbaarheid van het product is 3 jaar. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Bewaring en verwijdering

Transport en opslagomgeving:

Het product moet worden opgeslagen in een binnenomgeving met een relatieve temperatuur van -25 °C ~ 30 °C, een luchtvochtigheid van 20% ~ 80%, uit de buurt van zonlicht, schoon, goed geventileerd en zonder corrosieve gassen of vloeistoffen en op een hoogte lager dan 1500 m.

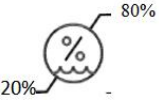
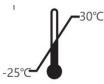
Afvalverwerking



Na gebruik in de afvalbak gooien.

Definities van symbolen

	CE-markering		Fabrikant
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Modelnummer
	Houdbaarheidsdatum		Uit de buurt van zonlicht houden
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		Niet hergebruiken
	Productiedatum		Partijnummer
	Voorzichtig		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Medisch hulpmiddel		Droog bewaren
	Na gebruik in de vuilnisbak gooien		Niet steriel

	Gebruiksaanwijzing	Bestands NEE.	HY/CE-01 _ 2.2-NL
		Rev. NEE.	A/2
	Warmtepakkingen	Rev. Datum	28.04.2025
		Pagina	6 van 6
	Beperkte vochtigheid		Temperatuurbeperring

e-IFU

U kunt inloggen op de URL: www.jshanyao.com om de e-IFU van de warmtepakketten te bekijken.



Fabrikant

Naam: Jiangsu Hanyao Medical Devices Co., Ltd.

Adres: NEE.901 Yongchang Weg, Suining Districten, Xuzhou, 221200, Jiangsu. Volksrepubliek China

Tel.: +86 516 88286658

Postcode: 221200

E-mail: 15900688890@qq.com



Europese geautoriseerde vertegenwoordiger

Naam: HUMISS TRADING S. L.

Adres: Calle Luis Buñuel 12, MADRID, 28018, Spain

SRN:ES-AR-000040177

Tel: +34-640150649

E-mail: info@humiss.com

Rev. Datum: 28.04.2025 Rev. NEE.: A/2